


MANUAL DE USUARIO

# ¿CÓMO USAR?



24:00 horas

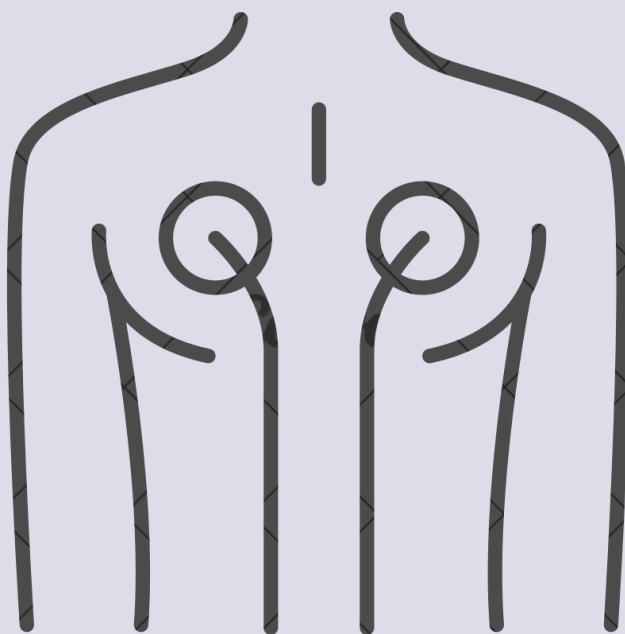

3024341299



Prototipo-EKG


# Componentes del Holter

1. Unidad de Registro
2. Electrodo
3. Cables de Conexión
4. Baterías
5. Manual de Usuario

## Colocación de Electrodos

- Uno en el centro del pecho lado izquierdo.
- Uno en el centro del pecho lado derecho.
- Uno en el costado izquierdo del torso.

Adhesión: Retira la cubierta protectora de cada electrodo y pégalos firmemente en las posiciones indicadas.

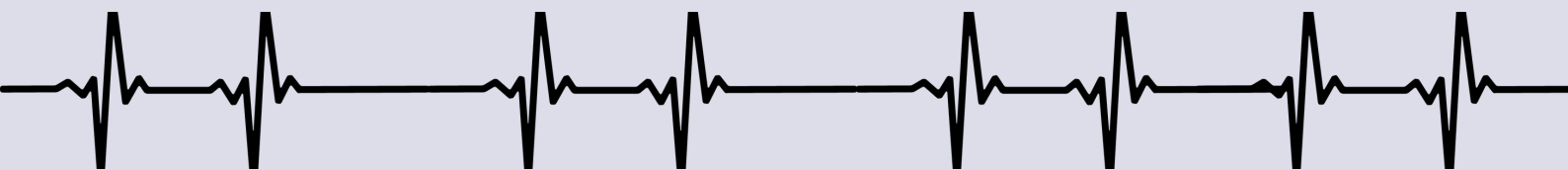

# Mantenimiento del Holter

- Limpieza: Limpia la unidad de registro y los cables con un paño suave y seco. No uses agua ni productos de limpieza fuertes.
- Almacenamiento: Guarda el dispositivo en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Consejos Adicionales

- Vestimenta: Usa ropa holgada para evitar que los cables se enganchen.
- Precauciones: Informa a tu médico si experimentas cualquier malestar inusual o problemas con el dispositivo durante el monitoreo.